


Siloměr

- **Siloměr** je přístroj na měření **síly**.
- Funguje na principu **prodloužení pružiny**.
- Hlavní jednotka: **newton (N)**.

Princip pružinového siloměru

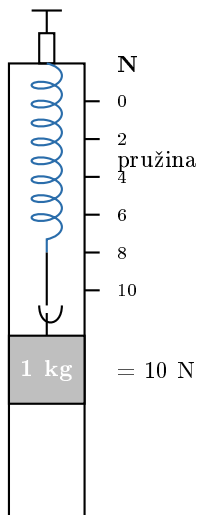

- Když pověsíme na háček těleso, pružina se **prodlouží**.
- Čím větší síla, tím větší prodloužení pružiny.
- Stupnice je **kalibrovaná v newtonech**.

Měřicí rozsah a citlivost

Druh siloměru	Rozsah	Použití
laboratorní	1–10 N	školní pokusy
ruční pružinový	10–100 N	vážení balíků, ryb
mincíř (vahadlový)	až 100 kg	tržiště, nákladní zboží
digitální (tenzometrický)	dle modelu	průmyslové vážení

Postup měření

1. Vyber siloměr s vhodným rozsahem (síla nesmí přesáhnout maximum).
2. Pověs siloměr za horní oko, aby visel svisle.
3. Nastav nulu (pokud má seřizovací šroub).
4. Pověs na háček těleso a počkej, až se pružina ustálí.
5. Odečti hodnotu **kolmo**, zapiš číslo i jednotku ($F = 4,5 \text{ N}$).

Hmotnost vs. tíhová síla

- Siloměr měří **sílu** (v N), ne hmotnost.
- Z tíhové síly můžeme spočítat hmotnost: $m = F : 10$.
- Příklad: siloměr ukazuje 25 N $\Rightarrow$ těleso má hmotnost asi 2,5 kg.